

Nasofaryngeale afname

- COVID-19/SARS-CoV-2 PCR: specifiek aanvraagformulier nodig.
- Zorg ervoor dat u de nodige persoonlijke bescherming gebruikt. Tijdens de staalfname kan een persoon hoesten, maar dit wordt niet beschouwd als aerosol genererend. Analoog aan de procedure voor druppel contact isolatie: maak gebruik van handschoenen, schort, chirurgisch masker en face shield.
- Waarschuw de patiënt dat dit onderzoek gedurende een kort moment onaangenaam kan zijn.

(Relatieve) contra-indicaties:

- Ziekte van Rendu-Osler-Weber
- Ernstige thrombopenie ($< 15 \cdot 10^9 / L$)
- Recente neus cauterisatie en/of chirurgie (8 – 10 dagen)

Consulteer de behandelende arts bij twijfel

STOP tijdens de procedure en probeer via ander neusgat indien: weerstand bij het inbrengen van de eSwab of pijn bij de patiënt




- 1** Buig het **hoofd lichtjes (70°) naar achteren**.
Bring de eSwab horizontaal in over de bodem van de neus.



Volg de richting van de neusbodem (niet die van de neusrug)



- 3** **Draai de eSwab minimaal 3 maal rond** om voldoende materiaal op te nemen. Maak zoveel mogelijk cellen los door langs de binnenkant van het neusgat te schrapen.

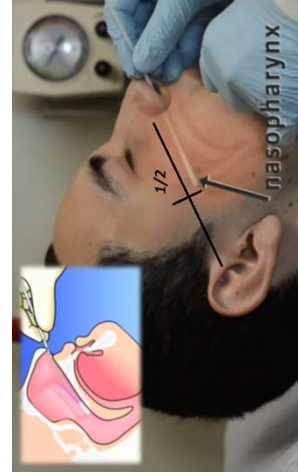

- 2** Bring de eSwab tot in de nasofarynx. Dit is **ongeveer de helft tot 2/3 van de lengte van de neus tot het oor**.



- 4** **Verwijder** de eSwab uit de neusholte.



- 5** **Breek de eSwab af** in de bijhorende tube ter hoogte van de rode lijn. Sluit de tube en breng de **patiëntgegevens** aan op de tube. In afwachting van verzending, bewaar de stalen in de koelkast (+4°C).

Afname van een gecombineerde keel- en oppervlakkige neuswiser

- COVID-19/SARS-CoV-2 PCR: specifiek aanvraagformulier nodig.
- Zorg ervoor dat u de nodige persoonlijke bescherming gebruikt. Tijdens de staafname kan een persoon hoesten, maar dit wordt niet beschouwd als aerosol genererend. Analoog aan de procedure voor druppel contact isolatie: maak gebruik van handschoenen, schort, chirurgisch masker en face shield.
- Neem een houten tongspatel en de eSwab met roze dop.
- Instrueer de patiënt dat hij zal gevraagd worden om "AH" te zeggen waardoor de huid wordt verheven. Waarschuw dat een kokhalsreflex kan uitgelokt worden door de handeling.
- Buig het hoofd lichtjes naar achteren, vraag de patiënt om diep in te ademen.
- Druk de tong met behulp van een tongspatel goed naar beneden. Vraag de patiënt 'AH' te zeggen.
- Plaats de wiser tegen de achterwand van de keel en strijk met de wiser een 2-3 tal keer tegen de dorsale farynx-wand, doe dit zowel aan de linker als de rechter kant. Doe dit zacht, maar doelgericht en snel. Indien het niet lukt in een beweging, vraag de patiënt tussentijds om nogmaals diep in te ademen en "AH" te zeggen.



- Breng vervolgens dezelfde wiser achtereenvolgens in het rechter en linker neusgat. Hou deze horizontaal en stop van zodra je lichte weerstand voelt of tot waar verdragen wordt (niet tot in de nasofarynx schuiven!)
- Draai 3 keer rond in elk neusgat.



- Breek de eSwab af in de bijhorende tube ter hoogte van de rode lijn. Sluit de tube en breng de patiëntgegevens aan op de tube.
- In afwachting van verzending, bewaar de stalen in de koelkast (+4°C).

Afname materiaal



Type:	Dunne wisser (tube met rode dop)	Dunne wisser (eSwab met oranje dop)	Dikkere wisser (eSwab met roze dop)
Aangewezen gebruik:	Nasofaryngeale afname	Nasofaryngeale afname	Gecombineerde afname keel- en oppervlakkige neus Of Nasofaryngeale afname.